


### Set Up



Start with the Meter off. Do not insert a Test Strip.

1. Hold down the **S** button until Meter beeps and full Display appears. Meter is now in Set Up mode.

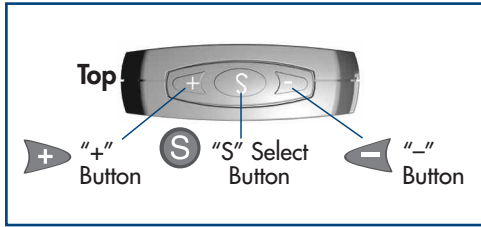




#### Setting Time:

2. The number for the hour flashes. Press the **+** button to increase or the **-** button to decrease. Press the **S** button when the correct hour is shown.
3. Repeat Step 2 for minutes.

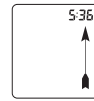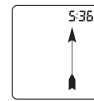

#### Setting Date:

4. The number for the month flashes. Press the **+** button to increase or the **-** button to decrease. Press the **S** button when the correct month is shown.
5. Repeat Step 4 for day.
6. Repeat Step 4 for year.

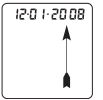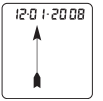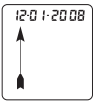

For more detailed information, including a troubleshooting guide, refer to the Owner's Booklet.

### Coding Your Meter

1. Remove Code Chip from Test Strip Box. Match the number printed on the Code Chip to the number on the Test Strip Vial (plastic container).



2. Insert Code Chip into your Meter with the numbers facing up.




### Blood Glucose Testing

1. Wash hands with warm, soapy water.
2. Remove Test Strip from vial and recap vial immediately.
3. With Meter off, insert Test Strip (Contacts facing up) into Test Port. Meter turns on.



4. Confirm Meter Display and Code Chip number matches.

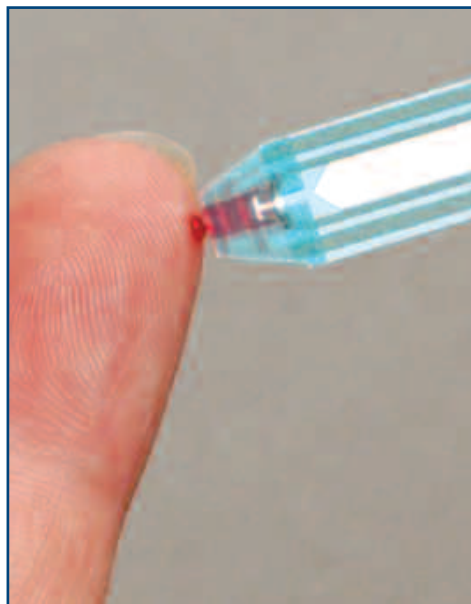

5. Lance finger. Let a blood drop form.
6. Place Sample Tip of Test Strip against blood drop and hold (see illustration). Blood is drawn into Test Strip until Meter beeps. (See Note below).
7. After countdown, glucose result is displayed with date/time. Remove Test Strip and discard. Meter turns off. Test result is stored in Meter's Memory.



**Note:** Discard Test Strip if Meter did not beep within 5 seconds after placing Tip of Test Strip against blood drop. Repeat test with new Strip and new blood sample. If problem persists, see Owner's Booklet.

### Data Management • Refer to the Owner's Booklet.


HOMEdiagnostics™

Always follow the treatment advice given to you by your doctor or diabetes healthcare professional.

## Configuración


Comience con el Glucómetro apagado. No inserte una Tira de Prueba.

1. Mantenga oprimido el botón **S** hasta que suene el Glucómetro y aparezca una visualización completa en la Pantalla. El Glucómetro está ahora en la modalidad de Configuración.

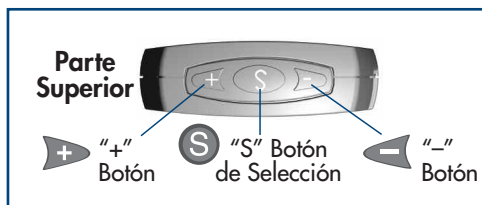




### Ajuste de la Hora:

2. El número para la hora destella. Oprima el botón **+** para aumentar o el botón **-** para disminuir. Oprima el botón **S** cuando se muestre la hora correcta.
3. Repita el Paso 2 para los minutos.

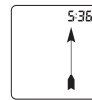

### Ajuste de la Fecha:

4. El número del mes destella. Oprima el botón **+** para aumentar o el botón **-** para disminuir. Oprima el botón **S** cuando se muestre el mes correcto.
5. Repita el Paso 4 para el día.
6. Repita el Paso 4 para el año.

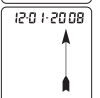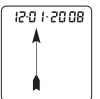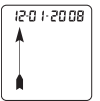

Para obtener una información más detallada, incluyendo una guía para localización y solución de problemas, consulte el Folleto del Usuario.

## Codificación del medidor

1. Retire el chip del paquete de tiras reactivas. Verifique que el número del chip coincida con el del frasco de tiras reactivas (envase de plástico).



2. Inserte el chip en el medidor de manera que se vean los números.




## Prueba de Glucosa en Sangre

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón.
2. Saque la Tira de Prueba del frasco y vuelva a tapan el frasco inmediatamente.
3. Con el Glucómetro apagado, inserte la Tira de Prueba (Con los contactos mirando hacia arriba) en el Conector de Prueba. El Glucómetro se enciende.



4. Confirme que los números de la pantalla del medidor y los del chip de codificación coincidan.
5. Pinche el dedo con la lanceta. Deje que se forme una gota de sangre.

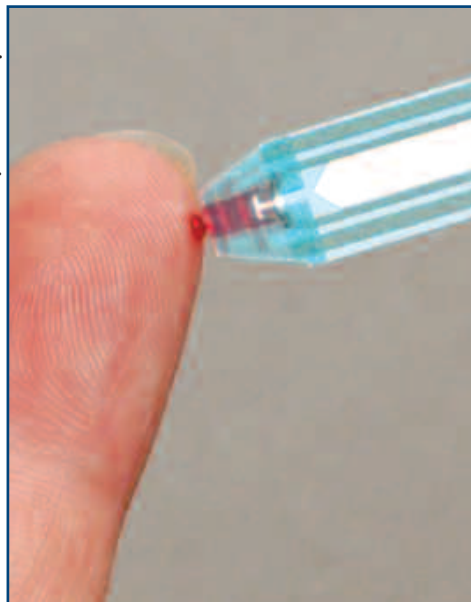

6. Coloque el Extremo de Muestra de la Tira de Prueba contra la gota de sangre y manténgalo en esa posición (vea la ilustración). La Tira de Prueba absorbe la sangre hasta que el Glucómetro suene. (Vea la Nota).
7. Después de la cuenta regresiva, aparece en la pantalla el resultado de la glucosa con la fecha/hora. Saque la Tira de Prueba y deséchela. El Glucómetro se apaga. El resultado de la prueba se almacenará en la Memoria del Glucómetro.



**Nota:** Deseche la Tira de Prueba si el Glucómetro no sonó en un período de 5 segundos después de colocar la Punta de la Tira de Prueba contra la gota de sangre. Repita la prueba con una Tira nueva y una nueva muestra de sangre. Si el problema persiste, vea el Folleto del Usuario.

**Manejo de la Información** • Consulte el Folleto del Usuario.

HOMEdiagnostics™

Siga siempre el tratamiento indicado por su médico o especialista en diabetes.